

No. _____

保修卡

凭卡保修

品 类	家用美容仪	型 号	YJFM24V
产品名称	多功能美容仪		
免费维修	对象:主机	期限:自购买本产品当日起1年内	
※ 经 销 商	门店名称/地址 请将购买当日的详细资料贴于此处或与保修卡一并保管		

经销商将相关信息填写在带※的必填栏后,交回客户保管
 免费维修时,仅对本说明书中所记载的指定对象部件进行免费维修。
 上述【免费保修期】内如发生故障时,请您携带本产品及保修卡前往购买本产品的经销商进行维修。
 ●如果本卡的空白栏中没有按规定填写购买日期,或没有购买明细,则此保修卡无效。
 ●本保修卡不接受补办,请妥善保管。

〈免费维修的相关规定〉

- 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行。使用时所出现的故障可换购保修卡前往购买本产品的经销商接受免费维修。
- 保修期间,产品发生故障并需接受免费维修时,请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商接受免费维修。
- 住址搬迁时,请提前与购买本产品的经销商联系。
- 如将本产品送作他人使用而导致本产品无法享受本书中所记载经销商的免费维修时,请联系客户服务热线。
- 保修期间,以下情况不属无偿保修的对象范围。
 - 使用不当或不正确的维修及改造所造成的故障及损伤。
 - 更换电池、耗材品、配件等零部件时。
 - 以下①~⑧原因导致的产品故障、损伤:
 - 错误使用
 - 购买后,因运输或使用过程中致使产品倾侧、跌落
 - 售后维修中心之外的第三方进行过维修、改造
 - 高温高湿环境中使用
 - 连接其他设备导致的异常
 - 非一般家用场景使用(例如:需长时间使用或使用异常电压等的商用情况)
 - (若说明书有指定的情况下)使用指定以外的电源
 - 使用了非原装的零部件
 - 搭载在车辆、船舶上
 - 海外使用
 - 因火灾、地震、水灾及其他自然灾害、公害或电压异常等造成的故障及损伤。
 - 因忽视导致的损伤;如跌落、浸泡、盗窃、丢失等情况。
 - 有改装或者拆卸的痕迹。
 - 没有按照使用说明书中指引的使用方法,或我司没有预想到的使用方法使用时。
 - 无法出具保修卡以及发票、保修卡的必填栏中未填写购买年月日、经销商等信息、保修卡未加盖印章、填写信息有被改动。
 - 当根据销售记录等判断产品被转让、转售为二手商品(包括拍卖购买、私人销售或非授权经销商购买等)时。
 - 生产、销售多年后,难以找到维修、更换的配件时。
 - 除上述理由之外,我司判断不属于免费维修时。

※本保修卡对免费保修的时间及条件进行了一定的约束,但并非对客户在法律上应享有的权利进行限制。如过了保修期的修理尚有不明之处,可咨询经销商或中国总代理。
 ※因自然使用所导致的本产品性能劣化、消耗及耗材品的更换属于无偿保修对象范围外。
 ※保修区域仅限中国大陆地区。

“雅萌”是ヤーマン株式会社の注册商标。

制造商

ヤーマン株式会社

〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4



日本官网

中国总代理

广东倍捷医疗科技有限公司

地址:广东省佛山市顺德区盈峰商务中心
客户服务热线:400-931-8556
中文官网:https://www.ya-manchina.com/

YAMAN

TOKYO JAPAN

保管用
附保修卡

使用说明书

家用美容仪
Photo PLUS Prestige SP II

YJFM24V



目录

安全注意事项	1
使用注意事项	7
产品说明	8
使用前	9
使用方法	17
使用后	22
排除故障	23
售后服务	28
●关于充电电池的废弃	28
●关于有害物质或元素的说明	30
●产品规格	31
●关于保修	31

衷心感谢您选购YA-MAN的产品。




- 为确保正确、安全使用,请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后,请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将本产品转让他人使用时,请务必附带使用说明书。

安全注意事项




安全注意事项

- 请仔细阅读所有指示内容，以确保能安全及正确地使用本产品。
- 请务必按照使用说明书的指示进行操作。
- 如出现异常情况，请立即停止使用并联系当地的经销商进行维修。
- 如果机器在故障状态下使用，会对身体造成不良影响及构成危险，请务必注意。
- 本说明书所列举的注意事项对您的安全非常重要，请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度，将因错误操作而可能发生的状况分为“危险”、“警告”和“注意”。

●关于三类注意事项

 危险	不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。
 警告	不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。
 注意	不正当使用本产品可能导致人身伤害或引起财产损失。 ※财产损失是指：对房屋、财产以及家畜、宠物等扩大性损害。

●关于三类标示符号

	该符号表示禁止进行的事项。
	该符号表示务必遵守的事项。
	该符号表示务必注意的事项。

危险



禁止

请勿在以下情况使用

否则可能会导致医疗仪器发生故障

◆使用医疗仪器的人群

- 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
- 人造心肺机等维持生命用医用电子仪器
- 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器



警告

具有以下情况人群，请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤乃至身体问题。

- 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者、自身免疫性疾病患者
- 酒后人群、无法表达自己意识的人群、无法感知温度以及刺激的人群

以下部位请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤乃至身体问题。

- 体内接受过金属植入等外科手术的部位、骨折部位、皮肤出现受损、皮疹、炎症、瘙痒等异常的部位
- 口腔内、阴部、黏膜处、眼球、上眼睑等眼眶内区域、喉咙、凸起的痣、病毒性疣



禁止

以下人群请慎重，使用前请咨询专业医生后再使用。

否则容易引起事故或导致皮肤乃至身体问题。

- 高血压患者、急性病患者、传染病患者、恶性肿瘤和血液病患者、糖尿病等高度末梢循环功能障碍导致的知觉障碍、神经障碍者
- 皮肤病患者、遗传性皮炎患者、易过敏体质人群、发热或体温异常者、住院且服药人群、孕期以及哺乳期人群、高度近视者（-6D以上）
- 接受过整形外科或美容外科手术的人群、接受整形外科、美容外科手术仍在皮肤康复期的部位（如出血、肿胀、结痂等）

※若自身无法判断是否可以使用时，请先征询专业医生的意见。



禁止

除冰敷模式外，请勿长时间贴于同一位置使用。

请勿用于护理头无法完全贴合的部位。

否则可能会导致烫伤或低温烫伤。



禁止

请勿过度使用。参考使用说明书的建议使用时间与使用频率。

否则可能会导致人体受伤。



限制使用对象

使用前确认电极是否有裂痕、变形、破损等不良情况，

如有类似情况，请勿使用。

否则可能会导致肌肤问题、人体受伤。

安全注意事项

警告

请勿在以下场所充电、使用、保管本产品。

- 浴室、浴缸、洗漱台等靠近水源的地方
 - 灰尘较多的地方、阳光直射到的地方以及室外
 - 容易导致主机振动、掉落、受到碰撞的地方
 - 带有强电波和磁力的地方
 - 易燃物质(如酒精、稀释剂、汽油、卸甲水、定型喷雾等)的附近
 - 油烟、高温水气的地方
 - 炙热阳光下,以及火源、热能电器附近等高温的地方
 - 温度变化剧烈的地方(如空调、取暖器的附近)
- 否则可能会导致主机故障、发热、起火、触电、人体受伤。



禁止

请勿使用已损坏的电源适配器或有松动的插座。

否则可能会导致触电、短路或起火。
如需维修,请联系当地经销商。



禁止

使用过程中,请勿将插头从插座以及主机上直接拔出。
否则可能会导致触电、短路或起火。务必关闭电源后再拔出电源适配器的插头。



禁止



用途以外
禁止
请勿将本机用于使用说明书中所记载的用途以外的其他用途。
否则可能会导致主机故障、人体受伤。



禁止

请勿在通电状态下放置、保管本机。
否则可能会导致起火、事故。



限制使用对象

儿童需在监护人监督下或在专家指引下使用。
否则可能会导致事故或人体受伤。



限制使用对象

请放置于儿童无法触及的地方。
否则可能会导致事故或人体受伤。



当心火灾

请勿将主机放置于靠近火源、炽热阳光下、浴室等高温高湿的地方。
本机使用内置充电锂电池。
否则可能会导致主机发热、起火或破裂。

警告



务必遵守

主机因掉落或碰撞而出现破损时,请立即关闭电源,拔出插头;同时,请联络当地经销商进行检查确认。
否则可能会导致触电、起火。



禁止拆解

请勿自行拆解维修或改装。
否则可能会导致触电、起火、人体受伤。
如需维修,请联络当地经销商。



拔出插头

如感觉地震或雷鸣,请关闭电源,拔出插头。
否则可能会导致火灾或触电。



禁止

本产品必须使用专用的电源适配器。
否则可能会导致触电、短路、起火。



禁止使用延长线

电源适配器必须直接插入墙壁上的电源插座,请勿使用延长线。
否则可能会导致触电、短路、起火。



拔出插头

拔出电源适配器时,请手握插头前端绝缘部位拔出。
此外,请勿用沾湿的双手插拔电源。
否则可能会导致触电、短路或起火。



拔出插头

使用后、不使用时或进行产品清洁保养时,务必关闭电源,并将电源适配器从插座上拔出。
充满电后,务必将电源适配器从插座上拔出。
否则可能会导致起火、事故。



禁止不当处理

请勿损坏、加工、用力弯曲、过度拉扯、捆扎电源适配器。
电源线如有破损,容易导致触电、起火。
收纳整理时,请勿过度折扭电源线。



务必遵守

请务必使用100V~240V交流电源。插入电源适配器时,必须确认完全插入。
否则可能会导致触电、起火、主机故障。

⚠ 注意



请勿长时间使用于同一位置上。
否则可能会导致受伤。



请勿用于宠物的护理。
否则可能会导致宠物受伤。



请勿连续使用冰敷模式。
若持续使用冰敷模式，
冰感会减弱。
若需再次使用，请间隔
30分钟后再使用。



初次使用或尚未适应时，
请先使用强度1。
否则可能会引发事故、人
体受伤。



请勿用护理头碰触其他金属
表面。
禁止 否则可能会导致主机故障。



请勿用花洒、水龙头等水压
较强的出水冲洗本机。
请勿让本机浸泡于水中。
本产品防水规格为IPX5，无
法承受强水压环境以及长时
间的浸泡。
请勿将产品放置于高温高湿
的地方。
禁止 否则可能会导致主机故障。



使用期间，务必注意肌肤是
否出现异常。
如若感觉异常疼痛、疲劳感、
肌肤异常等情况时，请立即
停止使用。
如若肌肤不适合使用本产品
时，请停止使用。
若第二天异常情况无法缓解
时，请咨询专业医生。

⚠ 注意



请勿直视LED光源。
禁止 否则可能会引起眼部不适。



正在接受牙齿治疗或曾补过
牙的人士，使用离子、EMS、
超脉冲护理时，可能会感到
不适。
务必遵守 此时，可适当调低档位或调
整使用部位。



请务必遵守 请避免在同一部位持续使用
15分钟以上
过度使用可能会导致皮肤
问题。请根据皮肤状态合理
使用。



拔出电源
适配器 如若发生异常情况，请立即
拔出电源适配器。
使用过程中，若出现运行异
常、异响、冒烟或异味时，
请停止使用。

警告



务必遵守

只可连接100V~240V交流电源使用。
否则可能会导致火灾、触电、主机故障。




当心火灾

使用前,请先确认插头形状与电压后再使用。
否则可能会导致火灾、触电、主机故障。

- 插头形状与电压可能会因地域、住宿地点的差异而有所不同,请先确认后再使用。
- 关于变压器以及插头的转换,请咨询门店或当地经销商。
- 若电源适配器的电线出现破损,请联系当地经销商或中国总代理。

●主机

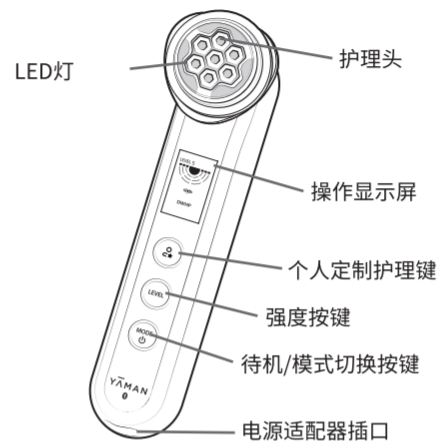

【配件】

●化妆棉固定扣

- ※购买时,该配件已经装配在护理头上。
- ※可将化妆棉固定在护理头上。



●电源适配器

- ※为提升产品品质,主机、配件的设计和规格如有改变,将不作另行通知。
- ※本机搭配使用的电源适配器型号为: AD-P090C200。

使用前

充电方法

本产品为充、插两用规格。若不搭配电源适配器使用时,请先进行充电。

- 初次使用(第一次使用或长时间放置没有使用)时,请务必先进行充电。并确认充电显示灯从闪烁状态变成常亮状态后再使用。
- 确认主机尾部的电源适配器插口没有沾有水分后,再接入电源适配器充电。否则可能会导致触电、短路、起火、主机故障。

建议充电时间

充电时间	使用时间
约3小时	约30分钟


- ※保持在约25°C的室温环境下充电。
- ※此为充满电后立即使用的可使用时间。
- ※使用时间会因使用的模式、强度以及使用环境而有差异。
- ※充电时间会因充电电池的残余电量、使用环境而有差异。

充电方法

- 将电源适配器的充电插口完全插入到主机尾部的电源适配器插口中。
- 将电源适配器的插头插入插座。
 - 务必搭配使用本产品专用电源适配器。
 - 请将电源适配器的插头直接插入插座,请勿使用延长线。
 - 充电开始时,充电显示灯为闪烁状态;充电完成后,充电显示灯常亮。
- 充满电后,从插座以及主机上拔出电源适配器。

操作显示屏

显示屏·按键

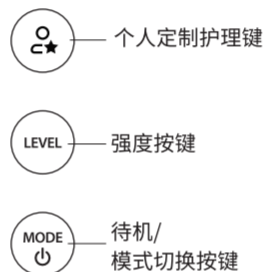






- 长按待机/模式切换按键约3秒,开启电源。
(开启电源后,自动进入待机状态。待机时,短按待机/模式切换按键可进入常规护理,短按个人定制护理键可进入个人定制护理。)
- 短按待机/模式切换按键,可切换至各个护理模式。
- CLEAN·DWHP·EMS UP·EYE CARE·NEB护理模式中,均可选择护理强度。短按强度按键可选择护理强度,本机可供5档选择。
- 长按待机/模式切换按键约3秒,关闭电源。

● 模式显示

• 常规护理






长按待机/模式切换按键开启电源,然后短按待机/模式切换按键,模式如下顺序依次切换:

CLEAN→DWHP→EMS UP→EYE CARE→COOL→CLEAN(重复)...

模式	CLEAN	DWHP	EMS UP	EYE CARE	COOL
功能	CERTEC 离子导出/ LED(红光)	CERTEC/ DYHP/DWHP/ LED(红光·琥珀光)	EMS/CERTEC LED(红光)	CERTEC/微电流/ 眼部专用EMS/ LED(红光)	冰敷/ LED(蓝光)
模式显示	 CLEAN	 DWHP	 EMS UP	 EYE CARE	 COOL

• 个人定制护理

长按待机/模式切换按键开启电源,然后短按个人定制护理键,进入预设的个人定制护理。模式如下顺序依次切换: CLEAN→NEB→EMS UP→EYE CARE→COOL→CLEAN(重复)...

模式	CLEAN	NEB	EMS UP	EYE CARE	COOL
功能	CERTEC/ 离子导出/ LED(红光)	CERTEC/ DYHP/LED (红光·琥珀光)	EMS/CERTEC LED(红光)	CERTEC/ 微电流/眼部专用 EMS/LED(红光)	冰敷/ LED(蓝光)
模式显示	 CLEAN	 NEB	 EMS UP	 EYE CARE	 COOL

个人定制护理的模式可通过微信小程序中的智能IOT功能进行自定义。进入个人定制护理状态时,显示屏会显示N+标识。

※该功能仅限用于中国大陆地区的手机号码注册的微信账号。

● 强度显示

初次使用或肌肤未适应时,请务必使用档位1。

部分模式可供5档选择,请选择自我舒适的档位。

通过强度按键可实现档位的切换。

● 充电显示

依据充电量的差异,充电显示灯会从1格到3格依次常亮或闪烁。


无线使用时:充电显示灯常亮

插线使用时:充电显示灯熄灭

充电中:充电显示灯闪烁

充满电后,充电显示灯常亮

※无线使用时,当残留电量不足,会连续响起三声“哔哔”的提示声。同时,充电显示灯闪烁3次后,自动关闭电源。

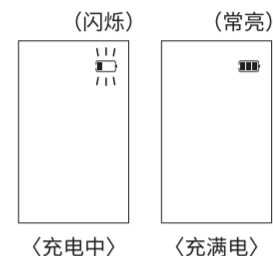

● 安全功能

• 温度传感器

当皮肤与护理头之间的温度变高时,为了安全,将会自动调整能量输出。此外,当温度过高时,为了安全,电源会自动关闭(响起10次“滴”的蜂鸣声)。此时,请30分钟后再使用本机。

• 电流传感器

监控并控制电流的输出。

• 动作传感器

感应主机的动作。当护理头持续贴于同一护理部位时,为了安全,将会停止输出。当主机移动速度过慢时,动作传感器也会自动调整主机的输出能量。此时,可能会感到温感减弱。

● 时间提醒·待机功能

当使用时间到达该模式一半的护理时间时,会响起“哔-”的半脸提示声;此时,请护理另外一边脸颊(半脸提示声功能)。

开启电源,CLEAN·DWHP·EMS UP·EYE CARE·NEB模式运行结束后,会进入下一模式的待机状态[※]。同时,显示屏会闪烁下一模式的标志。模式间的待机时间约为5分钟。

※进入待机状态后,短按待机/模式切换按键,闪烁中的模式会开始运行。

※若5分钟内没有进行操作,将会响起“哔哔”提示声,电源自动关闭。

● 自动关闭

进入待机状态后,5分钟内没有进行操作,将会响起“哔哔”提示声,电源自动关闭。
无论是常规护理还是个人定制护理,最后一个模式运行结束后,会响起“哔哔”提示声,电源自动关闭。

● 智能记忆功能

模式运行结束时,会自动记录该模式结束时的使用档位。下一次开启电源时,将会默认进入该档位。

● 防水规格

本产品的防水规格为 IPX5。
※本产品并非完全防水规格。请勿流水冲洗本机或将本机置于水中。
※电源适配器并非防水规格。

皮肤适应性测试

※初次使用本产品或初次搭配护肤品使用本机时,请先进行皮肤适应性测试。

1 清洁皮肤。

- 清洗手腕内侧,然后用毛巾擦拭干净。
- 使用时,请先脱下身上的金属产品(手表、项链、戒指、耳环等)。
否则可能会引起事故、人体受伤。

2 手腕内侧涂上护肤品(爽肤水·精华液)或清水,开启常规护理的DWHP模式,使用3分钟。

- 进行了皮肤适应性测试后,请勿直接用清水润湿或浸泡该部位。

确认24小时内,测试部位的皮肤是否有异常(发红或发烫)。如无异常,表示可正常使用。



注意

- 为防止出现皮肤问题,使用前务必先进行皮肤适应性测试。
- 若皮肤适应性测试部位出现红疹、发红、瘙痒、感到刺激等异常时,请立即停止使用,并用清水冲洗该部位。
- 皮肤感到异常时,请勿使用。

模式

本机搭配有常规护理以及个人定制护理。

- 常规护理
若使用全套常规护理,建议每周使用2~3次。

模式	功能	推荐使用护肤品	时间	强度
CLEAN	• CERTEC • 离子导出 • LED(红光)	化妆棉爽肤水	约3分钟	5档
DWHP	• CERTEC • DYHP • DWHP • LED(红光·琥珀光)	精华液或片状面膜	约3分钟	5档
EMS UP	• EMS • CERTEC • LED(红光)	精华液或片状面膜	约3分钟	5档
EYE CARE	• CERTEC • 微电流 • 眼周专用EMS • LED(红光)	眼部护肤品	约3分钟	5档
COOL	• 冰敷 • LED(蓝光)	涂抹乳液或面霜后使用	约3分钟	无

使用前


- 个人定制护理(以下为预设模式)
若使用全套预设的个人定制护理,建议每周使用2~3次。

模式	功能	推荐使用护肤品	时间	强度
CLEAN	• CERTEC • 离子导出 • LED(红光)	化妆棉爽肤水	约3分钟	5档
NEB	• CERTEC • DYHP • LED(红光·琥珀光)	精华液或片状面膜	约3分钟	5档
EMS UP	• EMS • CERTEC • LED(红光)	精华液或片状面膜	约3分钟	5档
EYE CARE	• CERTEC • 微电流 • 眼周专用EMS • LED(红光)	眼部护肤品	约3分钟	5档
COOL	• 冰敷 • LED(蓝光)	涂抹乳液或面霜后使用	约3分钟	无

使用前

- 请务必在皮肤上滑动使用(EYE CARE·COOL模式除外)。
- 连续使用冰敷模式,冰感会下降。
若需连续使用,请待主机停止运行30分钟后再使用。


洁面后再使用本机。使用顺序参考如下:

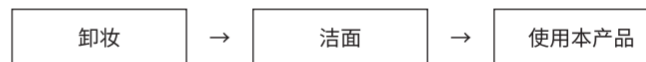

使用方法

化妆棉的装置方法

1 从护理头上取下化妆棉固定扣。

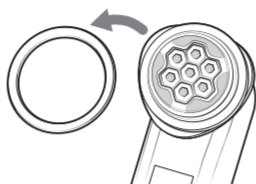

2 将1张化妆棉放于护理头上，
再将化妆棉固定扣推入，固定好化妆棉。

※化妆棉固定扣难以固定化妆棉时，建议选用更大、材质更薄的化妆棉。

若使用厚款化妆棉较难固定时，请先对半撕开再使用。

※若化妆棉过厚，皮肤对温热感知可能会变弱。

3 使用爽肤水充分润湿护理头上的化妆棉。

※搭配爽肤水使用时，务必确保爽肤水充分润湿护理头上的化妆棉。

※搭配清爽型爽肤水使用时，温感可能会变弱。

推荐使用质地浓稠的爽肤水。

※使用后，务必擦拭干净护理头上残留的爽肤水。

基本使用方法

使用时的注意事项

- 务必在皮肤上滑动使用。持续贴于同一部位使用，可能会导致低温烫伤（COOL模式除外）。
- 温热感，会因搭配使用的护肤品种类或皮肤状态的差异而感觉温度有异。
- 请勿用于眼球、上眼睑等眼内区域（COOL模式除外）以及眼尾（EYE CARE、COOL模式除外）的护理。
- 请勿直视LED灯光。
- 建议使用环境温度：15°C~30°C。
- 使用时，请先脱下身上穿戴的金属物件（手表、项链、戒指、耳环等）。否则可能会引起事故、人体受伤。
- 主机与皮肤接触的部位，每次使用完后，务必进行清洁。请确保与皮肤接触的部位为洁净状态后再使用。否则可能会导致皮肤问题。
- 皮肤表面感觉刺痛时，请调低护理档位或更换使用部位。另外，可适当补爽肤水、精华液等护肤品滋润皮肤，如若不够湿润，可能会增加刺痛感。

●护理方法

1 卸妆，清洗脸部。

※脸部使用时，请先卸妆。

带妆使用时，可能会因为残留的粉底导致皮肤变黑、变脏。

· 去除脸上的油脂与污垢，确保肌肤处于洁净状态。

※COOL模式可在妆后使用。

2 如有需要请先装置上化妆棉固定扣，然后用爽肤水润湿化妆棉。

※完成CLEAN模式护理后，务必更换化妆棉。

3 长按待机/模式切换按键约三秒，开启电源，进入待机状态。然后短按待机/模式切换按键进入常规护理，或短按个人定制护理键进入个人定制护理。选择对应护理流程后，再选择护理模式以及护理强度。

4 参照P.19~P.21的使用方法，将护理头贴于皮肤上滑动使用。

· 各个模式护理结束后会进入待机状态（待机状态：5分钟）。可短按待机/模式切换按键开启下一个护理模式。

※使用时，务必确保护理头完全贴于皮肤之上。

5 长按待机/模式切换按键约三秒，关闭电源。

※最后一个模式结束时，会自动关闭电源。

6 进行仪器的清洁与保养。

· 使用后，可依据个人需求涂抹面霜直至吸收。

※每次使用完毕后，请参考[使用后(P.22)]的指引，清洁干净残留在主机上的皮脂、脏污以及美容液。

若不及时做好清洁，容易导致主机故障、皮肤问题。

护理方法

沿着箭头指示方向滑动使用。

- 为保持护理头与皮肤之间有充足的护肤品、水分,使用过程中,请适当追加。护肤品、水分不足时,会导致护理头与皮肤之间的刺激传导变差,可能会引起皮肤问题。

<CLEAN·DWHP·NEB 模式>

感觉过热时,可加快滑动速度。此外,搭配化妆棉使用,可能会降低温感。


使用时,务必确保护理头完全贴于皮肤上使用。

使用时,务必确保护理头贴于脸部滑动使用。

持续贴于同一部位使用,可能会导致低温烫伤。

护理头请勿贴于眼球、上眼睑等眼眶内区域使用。

使用方法

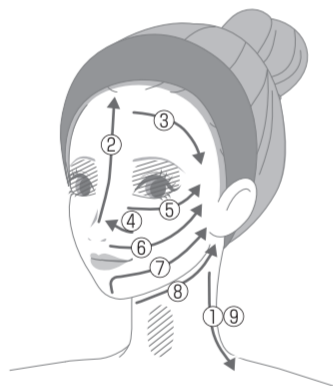

不能使用的部位: 眼球、上眼睑等
眼眶内区域、喉部

建议滑动速度: 2cm/秒




<EMS UP模式>

若皮肤表面感觉到较强的刺痛感,请调低档位使用,或避开该部位使用。

请务必使用清水、爽肤水或精华液等充分润湿皮肤后再使用。

否则可能导致皮肤问题。

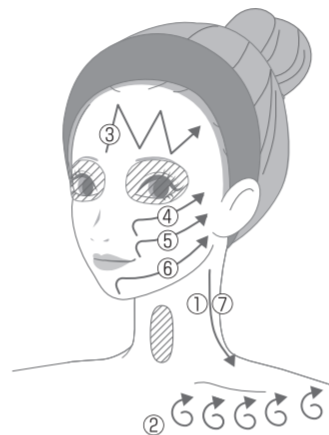

不能使用的部位: 眼球、上眼睑等
眼眶内区域、喉部

如箭头所示打圈移动




使用方法

<EYE CARE模式>

从眼角往眼尾方向,以[点按→离开→移动]的步骤重复进行护理。

※请勿贴于皮肤3秒以上。

※请按压式移动使用。

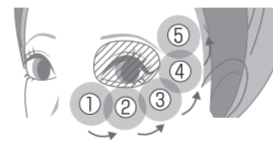

不能使用的部位: 眼球、上眼睑等
眼眶内区域。

※下眼睑、眼尾部位可使用

建议点按速度: 同一地方约3秒以内



若眼周特别干燥需要特殊护理时,可单独开机连续使用该模式。单边使用3分钟,双眼共计约6分钟。

<COOL模式>

以[点按→离开→移动]的步骤重复进行护理。

※下眼睑、眼尾部位可使用。



使用后

- 为保持本产品的洁净,每次使用后务必进行清洁。否则可能会导致皮肤问题。

●清洁、保养方法

1 关闭电源,拔出电源适配器。

2 拧干沾湿了的毛巾,擦拭干净护理头以及化妆棉固定扣上残留的污渍。若用水清洗化妆棉固定扣时,务必先从护理头上拆出化妆棉固定扣。

- 请勿使用酒精、稀释剂、汽油、卸甲水、灯油等溶剂以及药品、抛光粉等擦拭本机。否则可能会导致产品表面受损。
- 使用后,务必充分擦拭干净残留在主机上的爽肤水等护肤品。若残留有护肤品状态下放置本机,可能会导致主机故障。

3 可使用干布擦拭干净护理头、化妆棉固定扣之外的其他部位。

保管方法

- 长时间不使用时,请从插座以及主机上拔出电源适配器后再妥善保管。
- 请勿将本产品放置在暖炉等加热器旁、浴室等高温高湿的地方、炽热阳光下以及不平稳的地方。
- 请勿放在儿童触手可及的地方。

保养、检查

- 长时间闲置再使用本机时,请先确认本机处于正常、可安全操作的状态后再使用。否则可能会导致事故、主机故障。
- 本机若出现操作异常,可先参考说明书[排除故障(P.23~P.24)]的内容确认故障。若仍无法解决,可准备好购买凭证后联络当地经销商或中国总代理(P.31)。
- 本机出现故障、破损等情况时,可联系购买门店进行售后维修咨询。

使用
后

故障排除

检查项目

症状	推测原因及解决方法
无法开机	<ul style="list-style-type: none"> → 长按待机/模式切换按键3秒,电源开启(P.18)。 → 电量不足,请充电(P.9);或可直接连接电源适配器使用。
充电后仅能使用数分钟	<ul style="list-style-type: none"> → 电量不足,请充电(P.9);或可直接连接电源适配器使用。 → 电池寿命已完结(可充电次数:约300次)。请联络当地经销商或中国总代理(P.31)。 ※请勿自行更换电池,否则可能会导致主机故障。 → 误按按钮。 长按待机/模式切换按键3秒,重新开启电源(P.18)。 → 进入待机状态5分钟内没有操作,电源自动关闭(P.12)。 长按待机/模式切换按键3秒,开机。 → 低温环境下,可能会自动关机。请边充电边使用。
自动关机	<ul style="list-style-type: none"> → 若连续响起三声“哔~哔~哔~”的提示声,表示电量不足,请充电(P.9);或可直接连接电源适配器使用。 → 长时间放置在低温环境下,可能会自动关机。建议在15°C~30°C的室温环境下充电或使用本机。
无法充电 (充电显示灯不闪烁)	<ul style="list-style-type: none"> → 插头没有充分接入机身充电插口。请将插头充分接入(P.9)。 → 将电源适配器直接插入墙壁上的电源插座,并在关机状态下同时按下强度按键和待机/模式切换按键(重置)。
主机发热	<ul style="list-style-type: none"> → 连续使用。请关闭电源,30分钟后再使用。

故障排除

症状

推测原因及解决方法

COOL模式没有冰感	<ul style="list-style-type: none"> → 持续使用冰敷模式。请关闭电源,并让主机停止运行30分钟以上。 → 请在15°C~30°C的环境下使用。
EMS刺痛感过强	<ul style="list-style-type: none"> → 短按强度按键调节档位。 → 护理头没有完全贴在肌肤上。使用时护理头需要完全贴在肌肤上。
没有EMS刺激感	<ul style="list-style-type: none"> → 短按强度按键调节档位。 → 肌肤水分不足或过于干燥。请用爽肤水或精华液湿润肌肤后再使用。 → 没有按照指定手法使用。使用时,请确保护理头完全贴于皮肤上,并按照指定的手法使用(P.20)。
热感过强(COOL模式除外)	<ul style="list-style-type: none"> → 护理头长时间持续贴在同一个位置。请勿将护理头持续贴在同一部位上。 → 滑动速度过慢。请加快滑动速度。 → 搭配不同的护肤品和化妆棉使用时,温热体感有差异。如果热感过强,请尝试以下方式护理: • 更换使用的护肤品。
感觉不到温热感	<ul style="list-style-type: none"> → 处于待机状态。长按待机/模式切换按键,开启电源。 → 肌肤水分不足或过于干燥。请用爽肤水或精华液湿润肌肤后再使用。 → 滑动速度过快。请减慢滑动速度。
档位无法调节	<ul style="list-style-type: none"> → 冰敷模式无法调节档位。
功能不运行	<ul style="list-style-type: none"> → 同时按下强度按键和待机/模式切换按键(重置)。

故障排除


常见问题

Q	A
每次应使用多少爽肤水或精华液？	从本产品的特点来说,使用较多爽肤水或精华液,温感更强。 搭配化妆棉使用时,建议用爽肤水或精华液完全润湿护理头之上的化妆棉。 若感觉爽肤水或精华液不足时,请适当补充。
是否可在浴室使用? 是否可冲洗本机?	请勿在浴室中(浴室、浴缸)使用。本产品仅为IPX5防喷水规格,请勿将本产品直接置于水龙头水流之下冲洗或泡于水中。会导致主机故障。化妆棉固定扣可单独用水冲洗。
使用CLEAN·DWHP·EYE CARE·NEB模式时,没有温热感	请缓慢移动护理头,或尝试加强按压在皮肤上的力度。 此外,可能是化妆棉水分不足或精华液较少而导致的温感不强。可适当增加爽肤水或精华液。
护理后,化妆棉没有脏污	眼睛不容易看到的污垢也会被导出。污垢被导出后的附着状态会因人而异。
可否在片状面膜之上使用	可在片状面膜之上使用(CLEAN模式除外)。推荐DWHP·EMS UP·NEB模式时搭配使用。

故障排除

●关于蓝牙功能

- 本产品采用符合蓝牙标准协议的安全功能,用于蓝牙通信时的安全保障。但是,所设定的内容等原因,安全措施可能不足以完全应对。
- 即使在使用蓝牙通信功能时出现了数据或信息泄露,我们无法承担责任,请您事先知悉并理解。
- 本产品的频率范围如下。

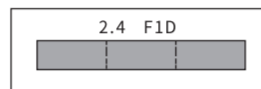


2.4 : 本产品使用频率为2,400MHz。

F : 表明主载波的调制类型为频率调制。

1 : 表明用于调制主载波的信号性质是单一通道的数字信号,且不使用副载波进行调制。

D : 表明传输信息的形式是数据传输、远程测量或远程指令。

 : 表明该产品使用全频带范围为2,402MHz至2,480MHz,并且无法回避移动识别设备使用的频带。

在飞机内使用时,请事先向各航空公司确认。

- 使用蓝牙设备时请注意以下事项:

在本产品使用的频率范围内,除了家用电器和工业、科学、医疗设备之外,还有需要许可证的移动识别设备内部无线电设备、不需要许可证的特定低功率无线电设备、业余无线电设备等(以下简称为“其他无线电设备”)

1. 在使用本产品之前,请先确认附近没有“其他无线电设备”正在运作。
 2. 如果本产品和“其他无线电设备”之间发生了电波干扰,请立即更换使用场所,或采取关闭电源等措施避免电波干扰。
 3. 若有其他疑问,请咨询当地经销商或中国总代理(P.31)。
- 本产品使用了经过日本电波法规定的工程设计认证的特定无线设备。

故障排除

售后服务

- 本产品及所有搭载蓝牙功能的设备已通过Bluetooth SIG规定的方式进行测试, 确定设备遵守蓝牙标准协议且已取得相关认证。但是, 由于连接的设备的特性和规格可能不同, 操作方法可能会有所不同, 或者即使成功连接也有无法进行数据交换的情况。
- 使用本产品请注意以下事项。
请勿使用经过改造过的产品。使用改装后的设备可能会违反电波法规。
- 请注意以下与电波相关的事项。
本产品搭载了蓝牙功能。根据国家或地区的法律, 在某些情况下可能不能使用蓝牙功能。购买或使用前, 可先咨询当地有关部门的规定。

● 商标

- Bluetooth®标志和商标是Bluetooth SIG, inc.的注册商标, ヤーマン株式会社在下许可使用该标志。

故障排除

● 关于充电电池

- 充电电池为消耗品 (不在保修范围内)。
- 充满电后可操作使用时间较短时, 表示电池寿命可能即将完结 (充电电池寿命: 约可充电 300 次)。
- 如需更换充电电池时, 请联系当地经销商或中国官方总代理 (P.31)。

● 关于废弃

- 如需废弃本产品, 请遵照地方政府的相关规定废弃。
- 本产品使用锂离子充电电池。关于充电电池的废弃方法, 请参考以下内容:
《关于充电电池的废弃》《关于充电电池的拆卸方法》。



< 关于充电电池的废弃 >

本产品为锂离子充电电池, 可回收利用。

- 充电电池内置于主机之内, 废弃前请先从主机内拆出。
- 拆卸充电电池时, 请先关闭电源, 然后拔出电源适配器。
- 拆卸充电电池时, 需要使用螺丝刀, 请注意安全操作, 避免受伤。
- 拆卸电池时, 请避免划伤电池。※否则可能会导致充电电池发热、起火等。
- 取出充电电池后, 请遵照地方政府的相关规定处理。


售后服务

<关于充电电池的拆卸方法>


操作步骤

参考下图①~④的步骤拆卸电池。


① 使用尖细的工具撬开后盖板。
※后盖板由强力胶粘附着。

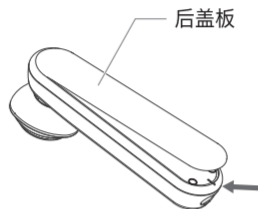

② 拆出图中内盖上的6处硅胶粒与螺钉。

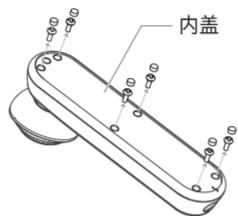


③ 拆开内盖，从连接器中拔出充电电池的连接线。

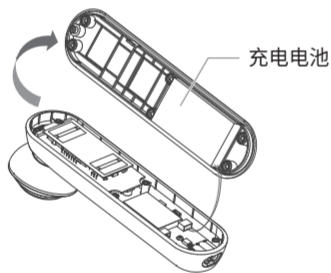


① 请勿切断充电电池连接线

④ 使用像尺子那样薄的工具，拆出充电电池。
※充电电池由强力胶粘附着。

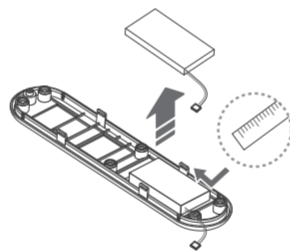

① 请勿切断充电电池连接线

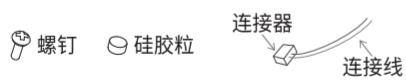

本操作指引仅适用于废弃主机时的操作指引，不能用于正常的产品维修。
若自行拆卸本机，可能会导致主机故障。

●关于有害物质或元素的说明

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011规定的限量要求。但是上述打“×”的部件，符合中国RoHS法规要求(属于豁免的部分)。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常的条件下不会发生外漏或突变，用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

●服务热线

与本产品有关的不明之处,可咨询以下的客户服务热线。

中国总代理:

广东倍捷医疗科技有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区盈峰商务中心

客户服务热线: 400-931-8556

●产品规格

额定输入	DC9V 2.0A(主机)
充电电池	锂离子充电电池
充电时间	约3小时 ※充电环境差异,充电时间有差异。
外形尺寸	主机(含化妆棉固定扣): 约W52xD62 x H203(mm)
产品重量	主机(含化妆棉固定扣): 约312g
材质	主机: ABS树脂 护理头: PCTG树脂、PET树脂、不锈钢
生产国家	日本
配件	化妆棉固定扣、电源适配器
推荐使用环境	15°C~30°C
防水功能	IPX5防水等级

售后服务

●关于保修

- 正常使用过程中如出现故障,以购买当天起1年内保修(耗材除外)。此外,超过保修期后,寄送产品的运输费用由客户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障,按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也有可能产生费用,请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障,请与经销商或中国总代理联系。

