

YAMAN

TOKYO JAPAN

使用说明书

家用美容仪
绿光面罩
YJMF0 系列

前言

非常感谢您购买雅萌产品。

- 使用前,请仔细阅读“安全注意事项”(P.3~P.8)。
- 为确保正确、安全使用,请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后,请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将本产品转让他人时,请务必附带使用说明书。

使用方法

1

清洁肌肤



2

连接面罩、颈罩与控制器



3

穿戴


当面罩、颈罩同时使用时，请先佩戴颈罩，后佩戴面罩。



4

开机

长按面罩开关/模式按键或颈罩开关按键进行开机。

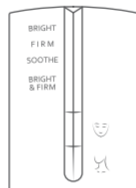

5

关机

同一个模式使用10分钟后，电源自动关闭。

目录

安全注意事项 ————— P 3

各部位的名称及功能 ————— P 9

使用前 ————— P 11

使用方法 ————— P 12

使用后 ————— P 18

须知 ————— P 20

● 疑似故障 ————— P 20

● 常见问题 ————— P 21

● 产品规格 ————— P 23

售后服务 ————— P 24

使用
前

准
备

使
用

保
养

须
知


■ 安全注意事项

- 使用前,请仔细阅读“安全注意事项”。
- 请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时,请立即停止使用并联系当地的经销商进行维修。
- 如果在故障状态下使用,可能会对身体产生不良影响,请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容,请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度,将因误操作而发生的状况分为“危险”“警告”“注意”。

关于注意事项


 **危险** 不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。

 **警告** 不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。

 **注意** 不正当使用本产品可能会导致人身伤害或引起财物受损。

※所谓财物受损,是指涉及房屋、家具以及家禽、宠物的损害。

关于标识符号

 表示禁止的事项。

 表示务必遵守的事项。

 表示务必注意的事项。

危险 (关于使用和保管)

- 以下人员请勿使用。
否则可能会导致医用电子仪器发生故障。
- ◆ 正在使用以下医用电子仪器人员
· 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器 · 人造心肺机等维持生命用医用电子仪器 · 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器



禁止

警告 (关于使用和保管)

- 具有以下情况人群, 请勿使用。
否则容易引起事故或导致皮肤乃至身体问题。
 - 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者、无法表达自己意识的人群、无法感知温度以及刺激的人群
 - 具有自身免疫性疾病患者 · 黑皮病 · 癫痫患者 · 光过敏患者
 - 因接受光动力疗法而正在使用光敏药物的人群 · 腰、颈、各关节或使用本产品部位上患有疾病的人 · 骨折的人
 以下人群请慎重使用, 使用前请咨询专业的医生。
 - 急性病患者 · 传染病患者 · 恶性肿瘤 · 发热或体温异常者 · 高血压患者和血液病患者
 - 患有糖尿病等高度末梢循环障碍引起的感知障碍的人 · 神经障碍患者
 - 皮肤病和特应性皮炎患者 · 正在接受门诊治疗并服用药物的人
 - 过敏体质、接触性皮炎、有皮肤病史或者使用本产品时肌肤感到不适的人
- 以下情况及部位请勿使用。
否则容易引起事故或导致皮肤乃至身体问题。
 - 皮肤出现受损、皮疹、炎症、瘙痒等异常时 · 酒后人群 · 口腔内、阴部、粘膜处等 · 眼球 · 上眼睑(眼窝)
 - 病理性色素部位 · 病毒性疣 · 骨折部位
 - 接受美容外科手术仍在恢复期的部位 (如出血、肿胀、结痂等)
 ※接受手术后2周请谨慎使用, 请先咨询专业医生的意见。
(手术示例: 玻尿酸注射、硅胶填充、肉毒杆菌素、埋线提拉、双眼皮整形、超声刀等)
- 请勿长时间连续使用。
- 请勿将本体、控制器置于水中。
否则会导致受伤或故障。



禁止

警告 (关于使用和保管)

- 请勿用于使用说明书中注明以外的用途。

否则可能会引起主机故障或人体受伤。



禁止用于
其他用途

- 请将本体、电源适配器、控制器放置于儿童接触不到的地方。请勿让儿童单独使用或玩耍。

- 未成年人请在征得监护人同意并在陪同下使用。

否则可能会引起事故或人体受伤。



使用限制

- 请勿过度使用。

请严格按照操作说明书规定的使用时间以及使用频率进行护理。

否则可能会对身体产生危害。

- 使用前请确认本体是否有破裂、变形、破损、故障等情况，如有以上情况请勿使用。

否则可能会引起肌肤损伤或人体受伤。



禁止

- 请勿在下列情况下使用、保管或给主机充电。

- 浴室、浴缸、淋浴室、洗漱台等湿气较重的场所。

- 灰尘较多的场所

- 阳光直射的场所或室外

- 容易倾斜、震动、被撞击的场所

- 有强电波或磁场的场所

- 易燃性物品附近 (酒精、稀释剂、汽油、卸甲水、定型喷雾等)

- 有油烟、水蒸气的场所

- 发热器具 (炉子等) 周围等高温场所

- 温度变化较大的场所 (空调、暖气设备等的旁边)

否则可能会引起主机故障、引发事故或人体受伤。

- 请勿在通电状态下放置本机。

否则可能会引发事故或起火。



禁止

警告 (关于使用和保管)

- 如电源线出现破损, 请勿使用。

请联系当地经销商或中国总代理进行处理 (P.26)。

- 请勿在昏暗的房间中使用。请勿直视照射部位。

否则可能会导致眼受伤。

- 请勿过度用力勒紧。

否则可能会产生压迫感、疲劳感及痛感。

- 请勿在穿戴本产品的情况下睡觉。

否则可能会引起肌肤问题及人体受伤。



禁止

- 请勿拆解、修理、改造主机。

否则可能造成触电、人体受伤或起火。
维修事宜请咨询当地经销商或中国总代理 (P.26)。



禁止拆机

- 请勿将本产品投入火中以及在加热、高温、高压的环境下充电、使用和放置本机。

本产品内置充电电池。

否则会引起主机发热、破损或起火。



着火注意

- 不使用或进行主机保养时, 请务必关闭电源。同时, 请从电源插座上拔出插头。

充电结束后, 请将电源适配器从电源插座上拔出。



拔下插头

- 如有机器摔落、破损等情况, 请立即关闭电源、拔出插头, 并联系当地经销商或中国总代理。

否则可能会引起触电或起火。

- 地震或打雷的情况下, 请关闭电源、拔出插头。

否则可能会引起触电或起火。



务必遵守

警告 (关于使用和保管)

- 使用时请取下身上佩戴的金属材质的配饰(项链等)。

否则可能会引起肌肤问题。

- 请在以下推荐的环境温度下使用本产品。

推荐使用环境温度: 10°C~40°C。

否则可能会引起主机故障或破损。

- 请勿对面罩和颈罩过度施加重力。

过度用力弯折、拉扯、拍打面罩和颈罩会引起主机故障或破损。



务必遵守

注意 (关于使用和保管)

- 请勿过度用力将面罩、颈罩按压在肌肤上或连续使用。

过度用力按压或连续使用可能会引起肌肤受伤。

- 开机状态下请勿与其他美容仪器或电器产品接触。

请勿与其他的电器产品(电热毯、电暖桌等)同时使用。

否则可能会引起事故。

- 请勿在车辆行驶过程中使用。

否则可能会引起事故或人体受伤。




禁止

- 使用时, 请注意肌肤是否有异常。
如若使用中感到疼痛、疲劳、皮肤不适或肌肤异常, 请停止使用。


若感到肌肤不适应请停止使用。次日若情况仍未好转, 请咨询专业医生。



务必遵守

 **警告** (关于电源)

- 务必确保插头切实插入。
否则可能会引起主机故障、触电或起火。
- 一旦发生异常，请立即关闭电源。
- 务必使用专用的电源适配器。
否则可能会引起短路、触电或起火。

 **警告** (海外使用注意事项)

- 务必使用100V~240V交流电压充电。
否则会引起触电或起火。



- 务必确认插头、电压情况以后再使用。
否则可能会引起主机故障、发热或起火。



- 有时因地区、住宿地不同，插头形状、电压也稍有不同。
请务必确认后使用。
- 关于插头转换器请咨询当地经销商。

■ 各部位的名称及功能

主机、配件的设计和规格如有改变，将不做另行通知。


配件

● 控制器

● 电源适配器

● 使用说明书


控制器

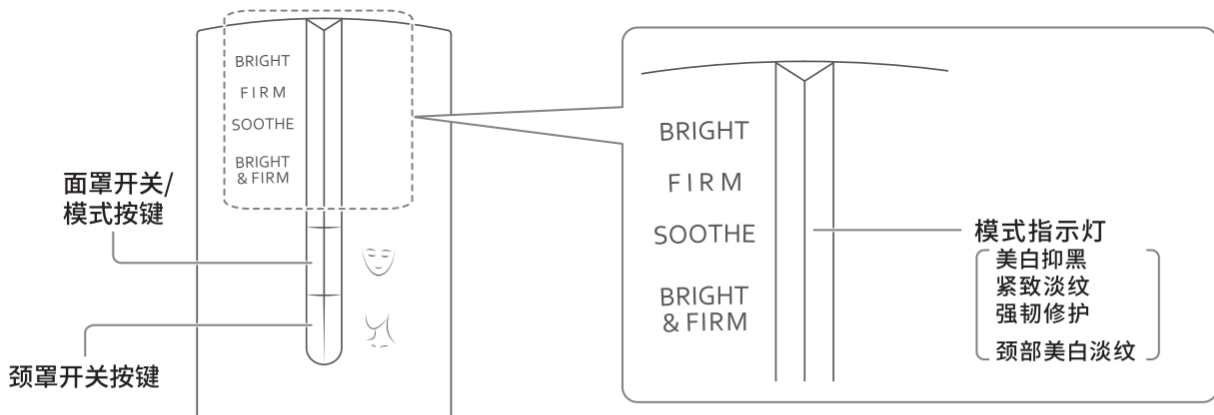

本体（面罩/颈罩）

● 面罩

正面

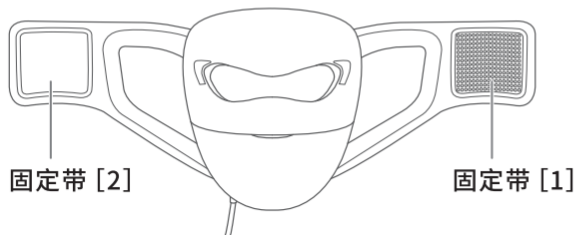


背面



● 颈罩

正面

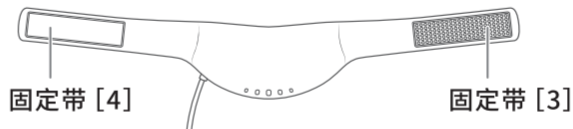

功能

自动关机


同一个模式使用10分钟后，电源自动关闭。

准备

■ 使用前

充电

请使用原装的适配器，适用AD-D090C100适配器。

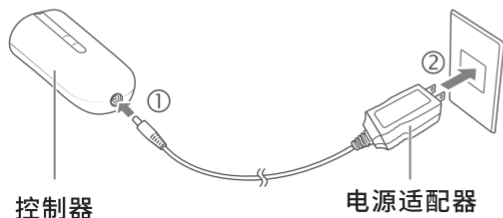

- 首次充电时，务必充满电后再使用。
- 初次使用或长时间不使用时，请充电后再使用。
- 请使用原装的电源适配器。

充电时	模式指示灯按照强韧修护→紧致淡纹→美白抑黑的顺序亮白色灯。
充电结束	强韧修护、紧致淡纹、美白抑黑的模式指示灯全部亮起，5秒后熄灭。
充电时间	约6小时
运行时间	约40分钟

※ 因充电环境、剩余电量的不同，充电时间及使用时间也会稍有不同。

● 剩余电量指示

剩余电量	模式指示灯
电量充足时	当前模式指示灯亮灯
剩余电量变少时	当前模式指示灯闪烁
剩余电量不足时	当前模式指示灯闪烁3次后灭灯，电源自动关闭

注意

- 控制器及充电端口沾有水渍时，请充分擦干。若在残留水渍的情况下进行充电或保管可能会导致控制器故障。
- 长期未使用而需要再次使用时，请先确认产品是否正常。否则可能会导致主机故障或人体受伤。

■ 使用方法

为防止肌肤问题，请务必先进行肌肤适应性测试。
开机使用一分钟后，如有不适请立即停用。

准备


1 清洁面部及颈部



请先卸妆，清洁面部、颈部后再使用。

- 头发长时，可将头发绑好再使用。
- 使用前，建议先在脸部和颈部涂抹适量精华、面霜、颈霜等护肤品，保持皮肤滋润。

2 连接控制器

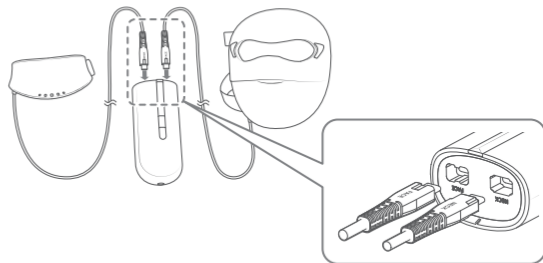

将面罩、颈罩与控制器连接。


- 安装时请勿按下控制器按键。
- 安装时请确保控制器处于关机状态。
- 面罩、颈罩未正确插入控制器时，控制器无法开机。

注意

- 请勿使用美容精油等含油性成分的护肤品，否则容易导致面罩、颈罩劣化。
- 请避免在带妆的状态下使用本产品。带妆使用可能会导致肌肤问题。


穿戴方法（颈罩）

1 将颈罩穿戴在颈部

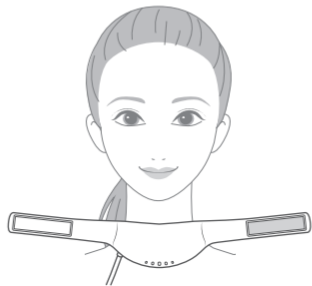

- 使用前请清洁颈部。穿戴前，建议先用护肤品对肌肤进行保湿护理。
- 请确认头发是否被夹住。
- 请参考上图，确保电线被置于下方。

2 调整固定带的位置和松紧度确保颈罩佩戴舒适

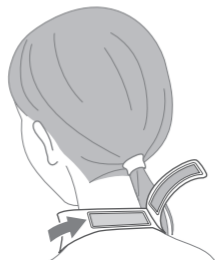

- 请调整固定带，让颈罩贴合肌肤。
- 请勿过度用力收紧固定带。
- 颈罩有可能出现无法完全贴合的情况，此时只需确保LED光照面有轻轻接触到皮肤或与皮肤相隔2cm以内即可。

注意

- 固定带是可伸缩的硅胶带，大力拉扯穿戴，可能会导致颈部不适。请调整固定带，让颈罩内侧的LED光照面轻轻接触到皮肤或与皮肤相隔2cm以内即可。

穿戴方法（面罩）

1 将面罩贴合面部



- 使用前请清洁面部。建议穿戴前，先用护肤品对肌肤进行保湿护理。
- 请确认头发是否被固定带夹紧。
- 请对准眼窗的位置，至贴合眼周。

2 调整固定带的位置和松紧度，确保面罩佩戴舒适




- 请调整固定带，至面罩贴合皮肤。
- 请勿过度用力收紧固定带。
- 面罩有可能出现无法完全贴合的情况，此时只需确保LED光照面有轻轻接触到皮肤或与皮肤相隔2cm以内即可。

提示

- 若面罩出现过小或过大情况，请调节背后的固定带至合适的松紧度。
- 当面罩、颈罩同时使用时，建议先佩戴颈罩，后佩戴面罩。

开始护理（颈罩）

1 开机

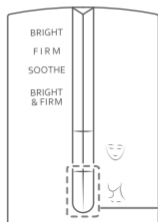

颈罩开关按键

长按颈罩开关按键，颈部美白淡纹模式指示灯亮起，主机开始工作。

无档位调节。

模式	LED光
颈部美白淡纹 (BRIGHT & FIRM)	绿+红


2 护理完成

- 使用模式护理10分钟后，电源自动关闭。
- 护理过程中若想暂停，请长按控制器上的颈罩开关按键关闭电源。

※每次使用后请参照【使用后】(P.18)将产品上附着的皮脂脏污及护肤品等清理干净。务必进行颈罩的清洁。否则可能会引起产品故障或肌肤问题。

开始护理 (面罩)


1 开机

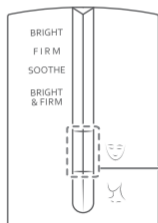

面罩开关/模式按键

长按面罩开关/模式按键，模式指示灯亮起，主机开始工作。

2 选择模式

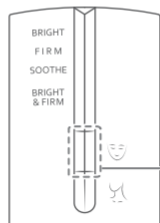

面罩开关/模式按键

面罩具有模式记忆功能，开机后自动默认上次最后关机时的模式。可短按面罩开关/模式按键，切换其他护理模式。护理模式按照美白抑黑→紧致淡纹→强韧修护的顺序切换。

无档位调节。

模式	LED光
美白抑黑 (BRIGHT)	绿
紧致淡纹 (FIRM)	红 + 红外光 [※]
强韧修护 (SOOTHE)	黄

※会有肉眼看不见的红外光与LED红光一起输出。

注意

- 请勿连续使用30分钟以上。可能会引起肌肤问题。
- 若在护理过程中感到炫目，请调整面罩的固定带至眼窗部分贴合眼周，并闭上眼睛进行护理。否则可能会引起眼受伤。

3 护理完成

- 使用模式护理10分钟后,电源自动关闭。
 - 护理过程中若想暂停,请长按控制器上的面罩开关/模式按键关闭电源。
- ※每次使用后请参照【使用后】(P.18)将产品上附着的皮脂脏污及护肤品等清理干净。
务必进行面罩的清洁。否则可能会引起产品故障或肌肤问题。

■ 使用后

保养方法


为使控制器、面罩及颈罩保持清洁，每次使用后请务必进行清洁。

用干的软布擦拭干净主机（含控制器）上的污渍。

- 顽固污渍难以清洁时，请用布蘸上稀释过的中性洗涤剂轻轻擦拭。
- 请勿在沾有皮脂脏污、护肤品等状态下放置。

注意

- 保养时务必先关闭电源。
否则可能会导致短路、触电或起火。
- 请勿用水冲洗。本产品不是防水规格。
否则可能会引起主机故障。
- 请勿使用碱性清洗剂、酒精、稀释剂、汽油、卸甲油等溶剂及药品，或具有研磨效果的研磨试剂擦拭仪器。

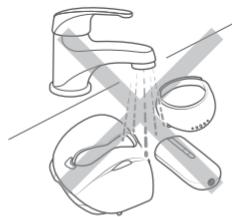

保管方法

- 请保管在儿童接触不到的、通风、干净的地方。
- 长期不使用时，请将电源适配器从插座上拔出，同时从控制器上拔出电线，再进行保管。
- 请勿放置在高温高湿（火旁、烈日下、浴室等）的地方。
- 保管时请勿弯折面罩、颈罩。

保养与检查

- 长时间不使用需要再次使用时，请先确认本产品是否处于正常操作状态。
- 本机出现异常时，送修前可先参照“疑似故障”（P.20）的内容，排查故障。若故障仍无法排除时，请准备好购买凭证，咨询当地经销商和中国总代理（P.26）。
- 本产品出现故障、破损等情况时，可咨询当地经销商或中国总代理。

■ 须知

疑似故障

使用本产品的过程中如有异常，送检维修前可先确认以下项目。

状况	可能的原因和排除故障的方法
无法开机	● 长按面罩开关/模式按键或颈罩开关按键1秒以上（P.15、P.16）。
	● 电量不足，请充电（P.11）。
	● 面罩、颈罩没有正确插入到控制器上。请检查是否将面罩、颈罩正确插入到控制器上。
充满电也只能使用几分钟	● 同一个模式使用10分钟后，电源自动关闭。
	● 电量不足，请充电（P.11）。
	● 电池寿命问题。请咨询当地经销商或中国总代理（P.26）。
操作过程中控制器上当前模式指示灯闪烁	● 可能是没有正确充电，请确认模式指示灯是否有正确亮灯。
	● 电量变少，请充电。
无法充电	● 请将电源适配器正确插入到控制器上（P.11）。
	● 请将电源适配器完全插入到电源插座上（P.11）。
操作过程中听到电子声	● 是正常的运行声音，并非故障。

常见问题

Q 推荐的使用频率以及时间

A 建议同一部位每日使用1次，每次使用时间约为10分钟。面罩建议一天使用一个模式，使用多个模式时使用时间请勿超过30分钟。

※同一个模式使用10分钟后，电源自动关闭。

※请依据皮肤状态，调整使用频率。

※使用时，务必注意肌肤是否出现异常。如有异常，暂停使用。

如果皮肤不适应，请停止使用。

Q 面罩、颈罩是否能分开使用

A 可以分开或同时使用。

Q 可否连续使用

A 本产品推荐使用时间为1天1次，单次使用时间约为10分钟。连续使用，请间隔30分钟以上。

Q 是否可以在浴室使用

A 本产品不是防水规格，请勿在浴室使用。

Q 是否可以在睡眠中使用

A 请勿在睡眠中使用。

Q 皮肤上出现了皮疹、炎症和瘙痒

A 可能是光、热不耐受导致的，请暂停使用。次日若情况仍未好转，请立即咨询专业医生。

Q 可以在干燥的皮肤上使用吗

A 可以使用，但建议使用前在脸部、颈部涂抹适量护肤品，效果更佳。

Q 面罩上有气味

A 可能会有硅胶特有的气味，并非异常，气味会逐渐散去，请勿担心。

Q 是否能戴着面膜使用

A 请勿戴着面膜使用。

Q 出现了不适感和疲劳感

A 可能是光、热不耐受导致的。在不适感消退前，请停止使用。

Q 出现了牙痛的情况

A 正在接受牙齿治疗等情况下，受到面罩的挤压可能会导致牙痛。如出现不适，请立即咨询专业医生。

Q 晒伤后是否能马上使用

A 可能会导致炎症。发生肌肤问题请立即停止使用并咨询专业医生。

Q 肌肤上出现了红印

A 由于面罩的挤压，皮肤可能会出现暂时性的发红。次日若情况仍未好转，请咨询专业医生。

Q 在脸上留下了面罩的痕迹

A 面膜的材质是可伸缩的硅胶材质。使用后可能会在脸上留下面罩的痕迹，一段时间后就会消失，可放心使用。

Q 脸部的彩妆有可能导致面罩染色吗

A 可能会导致染色，请卸妆、洁面后再使用。

产品规格

额定输入	DC9V 1A (主机)
使用电池	锂离子充电电池
充电时间	约6小时 ※充电环境不同,充电时间有差异。
使用时间	约40分钟(满电状态下) ※使用环境不同,可使用时间有差异。
外观尺寸	面罩 :约W177×H209×D247(mm) 颈罩 :约W139×H69×D132(mm) 控制器 :约W56×H130×D39(mm)
产品重量	面罩:约458g 颈罩:约141g 控制器:约196g
材质	面罩、颈罩:硅胶 控制器:ABS
产地	中国
配件	面罩1个 使用说明书1本 颈罩1个 控制器1个 电源适配器1个
推荐环境温度	10°C~40°C

■ 售后服务

关于废弃

- 废弃本产品时，请依照当地法律规定进行废弃。

关于内置充电电池的废弃


本产品所使用的锂离子充电电池，是贵重的可回收资源。

- 本机内置充电电池，废弃前请务必先取出。
- 拆卸电池时，请关闭电源，拔出USB电源线。
- 拆卸电池时，需要使用螺丝刀，请注意安全避免受伤。
- 拆卸电池时，请避免硬物划伤电池。※否则可能会引起电池发热、起火等。
- 拆卸下来的电池，请遵循当地政策（废弃及回收办法）进行处理。

操作步骤

参考下图①~⑤的步骤拆卸电池。


- ① 拆出插电线部分的面板，拆出两处螺丝。

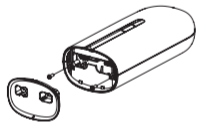


- ②-A 将背壳沿着右方向滑动。




- ②-B 背壳向下，拆开机身。

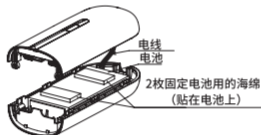


- ③ 拆出固定主板的6处螺钉。

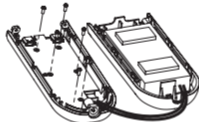

- ④ 拔出电池输出插头。

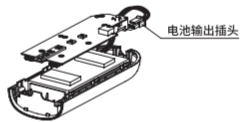

- ⑤ 取出电池进行废弃处理。

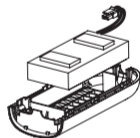


本操作指引仅适用于废弃主机，不能用于正常的产品维修。
若自行拆卸导致主机故障，请恕无法提供正常的售后服务。

■ 售后服务

关于有害物质或元素的说明						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

 **环保使用期限**
此标识指期限(十年), 电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常的条件下不会发生外漏或突变, 用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

服务热线

- 有关本产品的质保和维修等，如有不明之处，可咨询以下的客服热线。

中国总代理：

广东倍捷医疗科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区盈峰商务中心

客户服务热线：400-931-8556

Memo

Memo

Memo

关于保修

- 正常使用过程中如出现故障，自购买当日起1年内保修（耗材、配件除外）。
另外，超过保修期后，寄送产品的运输费用由用户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障，按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也可能产生费用，请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障，请联系当地经销商或中国总代理（P.26）。

免费维修的相关规定

1. 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行使用时所出现的故障，可携带本产品前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
 2. 保修期间，产品发生故障并需要接受免费维修时，请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
 3. 住址搬迁时，请提前与购买本产品的经销商联系。
 4. 如将本产品送作他人使用而导致本产品无法接受本说明书中所记载经销商的免费维修时，请联系当地经销商或中国总代理（P.26）。
 5. 保修期间，以下情况不属于无偿维修的对象范围。
 - (1) 使用不当或不当的维修及改造所造成的故障及损伤
 - (2) 电池及消耗品、配件等零部件更换时
 - (3) 因以下①~⑩而导致的故障及损伤
 - ① 使用不当
 - ② 购买后，因运输、移动及跌落
 - ③ 不当的维修及改造
 - ④ 在高温、高湿的环境下使用
 - ⑤ 与本产品连接的其他电器设备的异常
 - ⑥ 非一般家用情况（例如：需长时间使用或使用异常电压等的商用情况）使用
 - ⑦（若说明书有指定的情况下）用指定以外的方法通电
 - ⑧ 使用非原装部件
 - ⑨ 装载在车辆、船舶上
 - ⑩ 在海外使用
 - (4) 火灾、地震、水灾、以及其他自然灾害，环境污染，以及战争和冲突造成的损坏
 - (5) 顾客疏忽导致的损伤，如坠落、浸泡、盗窃、遗失等情况
 - (6) 当出现改装或者拆卸的迹象时
 - (7) 当确认产品使用了我没有预期的使用方式，或不遵守我提供的使用说明和安全说明时
 - (8) 保修证书或发票未附上时，或当购买日期和销售商名称未填写或盖章，或文字已被改写时
 - (9) 当根据我们的销售记录等判断产品被转让，转售，或为二手商品（包括拍卖购买、私人销售或非授权经销商购买等）时
 - (10) 当从制造和销售开始过了相当长的时间，修理或更换零部件的安排变得困难时
 - (11) 本保修卡中所规定的范围之外的情况
6. 保修地域仅限中国大陆地区。

※ 本保修卡对免费维修的时间及条件进行了一定约束，但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如对过了保修期的修理尚有不明之处，可向购买本产品的经销商咨询。

※ 因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿维修对象范围外。

※ 保修地域仅限中国大陆地区。

No. _____

保 修 卡

凭卡修理

品 类	家用美容仪	型 号	YJMF0 系列
名 称	绿光面罩		
保 修	对 象	时 间	
	控制器、 本体(面罩/颈罩)	自购买本产品 当日起 1 年内	
※ 经 销 商	门店名称/地址/联系		
	<p>请贴上标有购买日期的 明细或者将其与本质保书 一起保管。</p>		

请经销商将带有※的必填栏填写完毕相关的信息，然后交回客户保管。

制造商

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4



日本官网

中国总代理

广东倍捷医疗科技有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区盈峰商务中心

客户服务中心: 400-931-8556

中国官网: <https://www.ya-manchina.com/>

本保修卡承诺根据记录的内容免费维修。

左列“免费保修期”内发生故障时,请您携带本产品及保修卡前往购买本产品的经销商进行维修。

- 如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期或没有购买明细,则此保修卡无效。
- 本保修卡不接受补办,请妥善保管。