



使用说明书

家用美容仪
LED光学美容仪
YJMF1系列

前言

非常感谢您购买雅萌产品。

- 使用前，请仔细阅读“警告及注意事项”。
- 为确保正确、安全使用，请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后，请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将本产品转让他人时，请务必附带使用说明书。

目录


界面显示及功能介绍	01
充电与电量提示	02
护理流程与使用步骤	03
禁用及慎用提示	13
警告及注意事项	14
常见问题与疑似故障排查	16
内置充电锂电池的废弃方式	18
产品规格	19
包装内容	19
服务热线	19
产品结构及作用原理	20
有害物质或元素	21
关于保修	22
保修卡	23

界面显示与功能介绍


■ 面罩

正面

反面

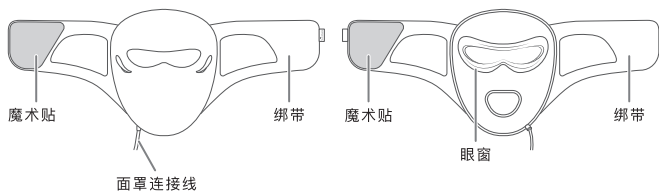

■ 控制器

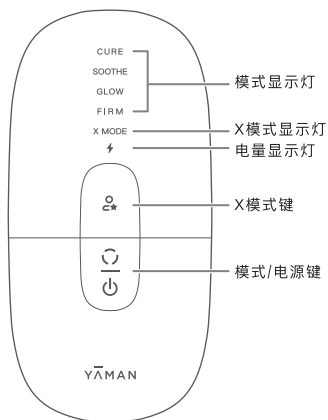

充电与电量提示

首次充电时，务必充满电后再使用。

初次使用或长时间不使用时，请充电后再使用。

请务必使用直流5V的电源以及官配充电线进行充电。


充电时间：约70分钟（因充电环境不同，充电时间有差异）。

使用时间：约30分钟（根据使用模式不同，使用时间有差异）。

■ 充电操作

①将充电线（官配）的一端插入控制器顶部的【充电端口】，另一端连接电源适配器（非官配）

②电量显示灯闪烁，开始充电。

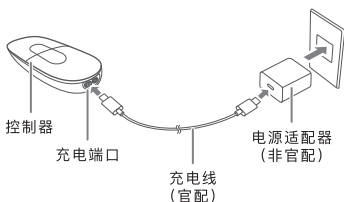

■ 充电指示

①充电提示：


充电时：白灯（闪烁）

充电结束：白灯（长亮）

②剩余电量提示：

电量充足：白灯

电量不足：橙灯

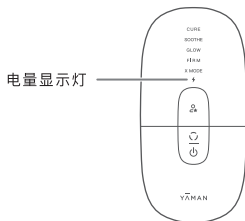

⚠ 注意

- 控制器、充电线及充电端口沾有水渍时,请充分擦干后再使用。
- 长期未使用而需要再次使用时, 请先确认产品是否正常。
- 初次使用或长时间未使用时, 即使显示满电可能也只能使用较短时间,请充电后再次使用。
- 为防止电池过放, 若产品长时间未使用, 建议每3个月对产品进行一次充电。
- 请使用官配充电线进行充电, 否则会无法充电或导致产品故障。
- 请勿将充电线或其他电线插入【面罩端口】, 否则会导致产品故障。

护理流程与使用步骤

1 清洁面部

使用前请先全脸卸妆洁面。

- 头发长时，可将头发绑好再使用。
- 使用前，建议先在脸部涂抹适量精华、面霜等护肤品，保持皮肤滋润。



肌肤适应性测试

- 为防止肌肤问题，请务必先进行肌肤适应性测试。
- 开机使用一分钟后，如有不适请立即停用。
- 若测试部位出现红疹、发红、瘙痒、感到刺激等异常时请立即停止使用，并用清水冲洗该部位。




⚠ 注意

- 请勿使用美容精油等含油性成分的护肤品。否则容易导致面罩劣化。
- 请勿使用贴片面膜、涂抹式面膜等，否则容易因为护肤品进入面罩而导致产品故障。
- 如需在面罩使用前使用精华、爽肤水、面霜等护肤品，请将护肤品涂抹至面部完全吸收后，再佩戴面罩。否则容易因为护肤品进入面罩而导致产品故障。
- 请避免在带妆的状态下使用本产品。否则可能会导致肌肤问题。

护理流程与使用步骤

2 连接控制器

按照右侧图示，将面罩连接线插入控制器顶部的【面罩端口】，与控制器连接。

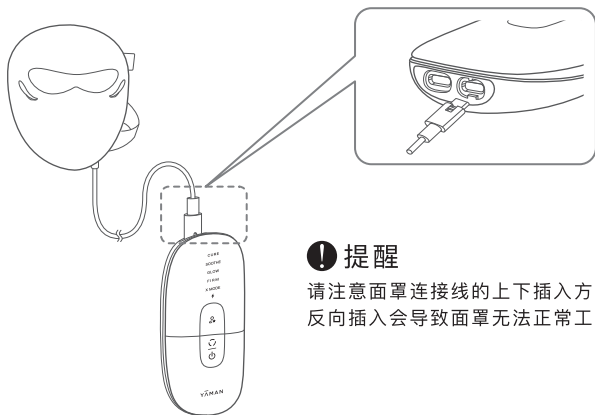

! 提醒

请注意面罩连接线的上下插入方向，反向插入会导致面罩无法正常工作。

! 注意

- 请勿将充电线或其他电线插入【面罩端口】，否则会导致产品故障。
- 连接控制器时，请勿按下控制器按键。
- 连接控制器时，请确保控制器处于关机状态。

3 佩戴面罩

将面罩贴合面部，眼周对准眼窗位置，并绑紧后方绑带。

- 请确认头发是否被绑带夹紧。
- 请将眼窗的位置微调至眼周觉得舒适的状态。
- 若面罩出现过大或过小情况、过松过紧等情况，请调整绑带的位置和松紧度，但请勿过度用力收紧绑带，确保佩戴舒适即可。
- 面罩有可能出现无法完全贴合面部的情况，此时只需确保LED光照面有轻轻接触到皮肤或与皮肤相隔2cm以内即可。




⚠ 注意

- 请勿过度使用重力压迫或用力拉扯面罩，否则可能会导致产品故障。


4 开机，选择护理模式

- ① 长按【模式/电源键】，响起“滴滴”提示音，开机。
- ② 【模式显示灯 (CURE)】闪烁，处于待机状态。

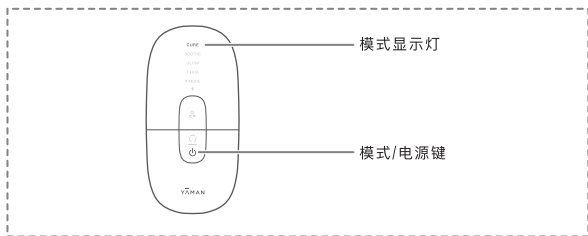


常规模式护理

- ① 短按【模式/电源键】，响起“滴”声提示音。
- ② 【模式显示灯 (CURE)】亮起，进入CURE模式护理。

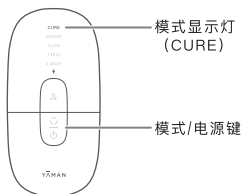

X模式护理


- ① 长按【X模式键】，响起旋律音。
- ② 【X模式显示灯 (X MODE)】亮起，进入X模式护理。

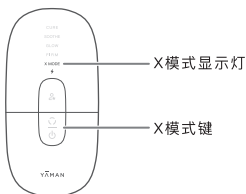

护理流程与使用步骤

■ 常规模式

- ①短按【模式/电源键】，响起“嘀”声提示音，切换4个模式。
- ②模式会按照CURE→SOOTHE→GLOW→FIRM→CURE的顺序循环切换。
- ③无档位调节。

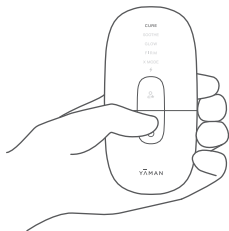

模式名称	光源种类
CURE	黄光、红外光（先后发出）
SOOTHE	红光、黄光（先后发出）
GLOW	黄光
FIRM	红光、红外光

注意：红外光为不可见光，因此当红外光单独输出、或与其他光源同时输出时，无法通过肉眼看见。

CURE模式

- 模式时长：约20分钟

注意：进入模式10分钟后，LED灯会从黄光切换为红外光。

由于红外光为不可见光，视觉光源会变暗，此时若控制器未关机，表示主机仍在工作，护理仍在继续。请待约20分钟模式结束后，仪器响起“嘀嘀”声后，会自动关机。

- 建议每周使用3-4次，或在需要时使用

注意：如遇皮肤不稳定时，请待皮肤稳定后再使用其他模式。

- 建议搭配：舒缓保湿类护肤品



护理流程与使用步骤

SOOTHE 模式

- 模式时长：约10分钟
- 每周建议使用 2 - 3 次
- 建议搭配：舒缓保湿类护肤品



GLOW 模式

- 模式时长：约10分钟
- 每周建议使用 2 - 3 次
- 建议搭配：温和美白类护肤品



FIRM 模式

- 模式时长：约10分钟
- 每周建议使用 2 - 3 次
- 建议搭配：温和紧致类护肤品



⚠ 注意

- 请勿单次或当日连续使用30分钟以上。否则可能会引起肌肤问题。
- 若在护理过程中感到炫目，请调整面罩的固定带至眼窗部分贴合眼周，并闭上眼睛进行护理。否则可能会引起眼受伤。
- 如需在面罩使用前使用精华、爽肤水、面霜等护肤品，请将护肤品涂抹至面部完全吸收后，再佩戴面罩。否则容易因为护肤品进入面罩而导致产品故障。
- 本产品不防水，请勿搭配涂抹式面膜、贴片面膜等使用。

护理流程与使用步骤

■ X智能定制模式（简称：X模式）

长按【X模式键】，响起旋律音，进入X模式。



若想退出X模式，可再次长按【X模式键】，响起“嘀”声提示音，退出X模式，自动进入CURE模式。

X模式默认设置

X模式默认为如下的预设模式，默认模式时间：约10分钟

- 额头区域:红光+红外光
- 眼周区域:黄光
- 脸颊区域:红光、黄光（先后发出）




* 可在小程序中对X模式进行个性化定制，具体定制内容，详见小程序的使用指引。

护理流程与使用步骤

5 护理结束，关机

- ①每个模式结束后，响起“滴滴”提示音，自动关机。
- ②如需手动关机，长按电源键约 2 秒，响起“滴滴”提示音，仪器关机。
- ③待机状态下约2分钟无操作，自动关机。

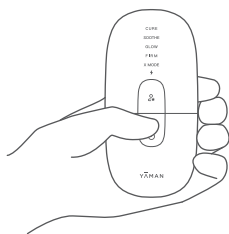

6 后续肌肤护理

光照结束后，可根据个人肌肤状态，再进行后续护肤。


- 使用产品期间，请注意做好防晒与保湿。

7 清洁方法

- ①每次使用后，请务必对控制器、面罩进行清洁，务必将产品上附着的皮脂脏污及护肤品等清理干净。
- ②请勿在沾有皮脂脏污、护肤品等状态下放置或收纳产品。
 - 用干的软布擦拭干净主机(含控制器)上的污渍。
 - 顽固污渍难以清洁时，请用布蘸上稀释过的中性洗涤剂轻轻擦拭。

⚠ 注意

- 清洁和保养时，务必先关闭电源。
- 请勿使用碱性清洗剂、酒精、稀释剂、汽油、卸甲油等溶剂及药品，或具有研磨效果的研磨试剂等擦拭仪器。
- 本产品不防水，请勿用水冲洗控制器和面罩。

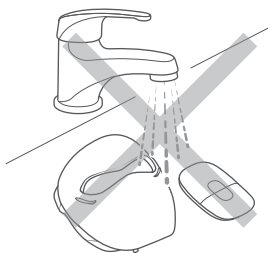

8 保管与收纳

①保管方法

- 请保管在儿童接触不到的、通风、干净的地方。
- 长期不使用时，请将电源适配器从插座上拔出,同时从控制器上拔出电线,再进行保管。
- 请勿放置在高温高湿(火旁、烈日下、浴室等)的地方。
- 保管时请勿弯折面罩。

②保养与检查

- 长时间不使用，需要再次使用时，请先确认本产品是否处于正常操作状态。
- 本机出现异常时,送修前可先参照“疑似故障”的内容,排查故障。若故障仍无法排除时,请准备好购买凭证，咨询当地经销商和中国总代理。
- 本产品出现故障、破损等情况时，可咨询当地经销商或中国总代理。

禁用及慎用提示

- **正在使用以下医用电子仪器人员，请勿使用本产品，否则可能会导致医用电子仪器发生故障，容易引发事故导致皮肤及身体问题：**
 - 人造心肺机等维持生命用医用电子仪器
 - 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器
 - 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
- **具有以下情况人群，请勿使用。否则容易引起事故或导致皮肤乃至身体问题。**
 - 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者
 - 无法表达自己意识的人群、无法感知温度以及刺激的人群
 - 具有自身免疫性疾病患者·黑皮病·癫痫患者
 - 光过敏患者·因接受光动力疗法而正在使用光敏药物的人群
 - 腰、颈、各关节或使用本产品部位上患有疾病的人·骨折的人
- **以下人群请慎重使用，使用前请咨询专业的医生。**
 - 急性病患者·传染病患者·恶性肿瘤·发热或体温异常者·高血压患者和血液病患者·孕期或哺乳期
 - 患有糖尿病等高度末梢循环障碍引起的感知障碍的人·神经障碍患者
 - 皮肤病和特应性皮炎患者·正在接受门诊治疗并服用药物的人
 - 过敏体质、接触性皮炎、有皮肤病史或者使用本产品时肌肤感到不适的人
- **以下情况及部位请勿使用，否则容易引起事故或导致皮肤乃至身体问题。**
 - 皮肤出现受损、皮疹、炎症、瘙痒等异常时·酒后人群
 - 口腔内、阴部、粘膜处等·眼球·上眼睑(眼窝)
 - 病理性色素部位·病毒性疣·骨折部位
 - 接受美容外科手术仍在恢复期的部位(如出血、肿胀、结痂等)
 - 接受手术后2周请谨慎使用，请先咨询专业医生的意见。(手术示例:玻尿酸注射、硅胶填充、肉毒杆菌素、埋线提拉、双眼皮整形、超声刀等)

警告与注意事项

● 安全注意事项

- 使用前，请仔细阅读“安全注意事项”。
- 请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时，请立即停止使用并联系当地的经销商进行维修。
- 如果在故障状态下使用，可能会对身体产生不良影响，请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容，请务必遵守。

● 关于使用与保管

- 请勿用于使用说明书中注明以外的用途。否则可能会引起主机故障或人体受伤。
- 请勿长时间连续使用。
- 请勿将本体、控制器置于水中。否则会导致受伤或故障。
- 请将本体、控制器放置于儿童接触不到的地方。请勿让儿童单独使用或玩耍。
- 未成年人请在征得监护人同意并在陪同下使用。否则可能会引起事故或人体受伤。
- 请勿过度使用。请严格按照操作说明书规定的使用时间以及使用频率进行护理。否则可能会对身体产生危害。
- 使用前请确认本体是否有破裂、变形、破损、故障等情况，如有以上情况请勿使用。否则可能会引起肌肤损伤或人体受伤。
- 如有机器摔落、破损等情况，请立即关闭电源、拔出插头，并联系当地经销商或中国总代理。否则可能会引起触电或起火。
- 地震或打雷的情况下，请关闭电源、拔出插头。否则可能会引起触电或起火。
- 请勿在下列情况下使用、保管或给主机充电。否则可能会引起主机故障、引发事故或人体受伤。
 - 浴室、浴缸、淋浴室、洗漱台等湿气较重的场所
 - 灰尘较多的场所
 - 阳光直射的场所或室外
 - 容易倾斜、震动、被撞击的场所
 - 有强电波或磁场的场所
 - 易燃性物品附近(酒精、稀释剂、汽油、卸甲水、定型喷雾等)
 - 有油烟、水蒸气的场所
 - 发热器具(炉子等)周围等高温场所温度变化较大的场所(空调、暖气设备等的旁边)

警告与注意事项

● 关于使用与保管

- 请勿在昏暗的房间中使用。请勿直视照射部位。否则可能会导致眼受伤。
- 请勿过度用力勒紧。否则可能会产生压迫感、疲劳感及痛感。
- 请勿在穿戴本产品的情况下睡觉。否则可能会引起肌肤问题及人体受伤。
- 请勿拆解、修理、改造主机。否则可能造成触电、人体受伤或起火。维修事宜请咨询当地经销商或中国总代理。
- 请勿将本产品投入火中以及在加热、高温高压的环境下充电、使用和放置本机。本产品内置充电电池。否则会引起主机发热、破损或起火。否则可能会引起触电或起火。
- 使用时请取下身上佩戴的金属材质的配饰(项链等)。否则可能会引起肌肤问题。
- 推荐使用环境温度:10℃-40℃。请在以下推荐的环境温度下使用本产品。否则可能会引起主机故障或破损。
- 请勿对面罩过度施加重力。过度用力弯折、拉扯、拍打面罩,否则会引起主机故障或破损。
- 请勿过度用力将面罩按压在肌肤上或连续使用。过度用力按压或连续使用可能会引起肌肤受伤。
- 开机状态下请勿与其他美容仪器或电器产品接触。
- 请勿与其他的电器产品(电热毯、电暖桌等)同时使用。否则可能会引起事故。
- 请勿在车辆行驶过程中使用。否则可能会引起事故或人体受伤。
- 使用时,请注意肌肤是否有异常。如若使用中感到疼痛、疲劳、皮肤不适或肌肤异常,请停止使用。若感到肌肤不适应请停止使用。次日若情况仍未好转,请咨询专业医生。
- 务必确保插头切实插入。否则可能会引起主机故障、触电或起火。一旦发生异常,请立即关闭电源。
- 充电时,必须使用输出端最大功率小于15W的且符合GB 4706.1-2005标准要求的适配器。否则可能会引起触电、发热、故障或事故。
- 务必确认插头、电压情况以后再使用。否则可能会引起主机故障、发热或起火。

常见问题与疑似故障排查

- 使用本产品的过程中如有异常，送检维修前可先确认以下项目。

疑似故障问题	可能原因和排除故障的方法
无法开机	<ul style="list-style-type: none">● 电量不足，请充电。● 长按【模式/电源键】2秒以上。● 请检查面罩连接线是否正确插入到控制器的【面罩端口】上。
充满电也只能使用几分钟	<ul style="list-style-type: none">● 模式结束后，电源自动关闭。● 电量不足，请充电。● 可能是没有正确充电，请确认电量显示灯是否亮起。● 电池寿命问题。请咨询当地经销商或中国总代理。
模式显示灯闪烁	<ul style="list-style-type: none">● 处于待机状态，无操作约2分钟后，仪器自动关机。● 短按【模式/电源键】，模式显示灯长亮，开始护理。
无法充电	<ul style="list-style-type: none">● 请确认充电线是否正确插入到控制器的【充电端口】上。● 请使用官配充电线。

常见问题与疑似故障排查

- 使用本产品的过程中如有异常，送检维修前可先确认以下项目。

常见问题	使用指引
推荐的使用频率以及时间	<p>按照个人护理需求选择模式，推荐使用频率如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● CURE模式：单次约20分钟，每周使用3-4次。● SOOTHE、GLOW、FIRM模式：单次约10分钟，每周使用2-3次。● X模式：每周使用2~3次。 <p>建议一天使用一个模式。 使用多个模式时，持续使用时间请勿超过30分钟。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none">● 请依据皮肤状态，自行调整使用频率。● 小程序上可调节单次模式时长，具体详见小程序内功能指引。● 使用时，请注意肌肤是否出现异常。如有不适或异常，暂停使用。
可否连续使用	<ul style="list-style-type: none">● 单次的使用时间约5-20分钟。● 需要连续使用多个模式时，单次总使用时间请勿超过30分钟。
是否可以在浴室使用	<ul style="list-style-type: none">● 本产品不防水，请勿在浴室使用。
是否可以在睡眠中使用	<ul style="list-style-type: none">● 请勿在睡眠中使用。
皮肤上出现了皮疹、炎症和瘙痒	<ul style="list-style-type: none">● 可能是光、热不耐受导致的，请暂停使用。次日若情况仍未好转，请立即咨询专业医生。
可以在干燥的皮肤上使用吗	<ul style="list-style-type: none">● 可以使用，但建议使用前在脸上涂抹适量护肤品，效果更佳。
面罩上有气味	<ul style="list-style-type: none">● 可能会有硅胶特有的气味，并非异常，气味会逐渐散去，请勿担心。
是否能戴着面膜使用	<ul style="list-style-type: none">● 本产品不防水，请勿搭配涂抹式面膜、贴片面膜等使用。
出现了不适感和疲劳感	<ul style="list-style-type: none">● 可能是光、热不耐受导致的。在不舒适消退前，请停止使用。
晒伤后是否能马上使用	<ul style="list-style-type: none">● 可能会导致炎症。发生肌肤问题请立即停止使用并咨询专业医生。
肌肤上出现了红印，在脸上留下了面罩的痕迹	<ul style="list-style-type: none">● 面膜的材质是可伸缩的硅胶材质。使用后可能会在脸上留下面罩的痕迹，一段时间后就会消失，可放心使用。
脸部的彩妆有可能导致面罩染色吗	<ul style="list-style-type: none">● 可能会导致染色，请卸妆、洁面后再使用。

内置充电锂电池的废弃方式

● 关于废弃

- 废弃本产品时，请依照当地法律规定进行废弃。

● 关于内置充电电池的废弃

- 本产品所使用的锂离子充电电池，是贵重的可回收资源。
 - 本机内置充电电池，废弃前请务必先取出。
- 拆卸电池时，请关闭电源，拔出充电线。
- 拆卸电池时，需要使用螺丝刀，请注意安全避免受伤。
- 拆卸电池时，请避免硬物划伤电池。※否则可能会引起电池发热、起火等。
- 拆卸下来的电池，请遵循当地政策(废弃及回收办法)进行处理。

● 面罩电池取出方法：

- 操作步骤

①按图示方式将按键面板拆开




②拆除固定螺丝



③将上盖面板拆出



④将主板取出，拔掉电池输出插头

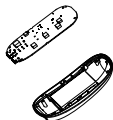

⑤取出电池进行废弃处理



⚠ 注意

- 本操作指引仅适用于废弃主机，不能用于正常的产品维修。
- 若自行拆卸导致主机故障，请恕无法提供正常的售后服务。

产品规格

- 产品名称：LED光学美容仪
- 产品型号：YJMF1系列
- 面罩尺寸：约W586xD224xH126mm
- 控制器尺寸：约W112xD54xH23mm
- 面罩额定输入：DC 5V 2.5A
- 电池容量：7.4Wh
- 充电时间：约70分钟（因充电环境不同，充电时间有差异）
- 使用时间：约30分钟（因使用环境与档位不同，可使用的时间有差异）
- 执行标准：GB4706.1-2005、GB4706.15-2008、GB/T36419-2018

包装内容


- LED光学美容仪（面罩）*1
- 控制器*1
- 充电线*1
- 说明书*1

服务热线

- 有关本产品的质保和维修等，如有不明之处，可咨询以下的客服热线。
 - 中国总代理：广东倍捷医疗科技有限公司
 - 地址：广东省佛山市顺德区盈峰商务中心
 - 客户服务热线：400-931-8556

产品结构及作用原理

- 本产品为小型家用电器，不属于医疗器械，产品结构及作用原理如下：

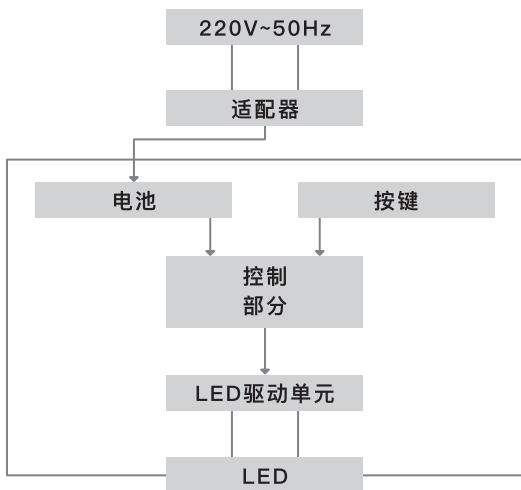

- 作用原理：通过LED光照射，对肌肤进行护理，同时促进所搭配的化妆品成分的吸收，达到皮肤美容的效果。

有害物质或元素

有害物质或元素

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(PBB)	多溴联苯(PBB)	多溴苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
织布	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。但是上述打“×”的部件，符合欧盟 RoHS法规要求（属于豁免的部分）。



环保使用期限

此标识指期限（十年），电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常的条件下不会发生外漏或突变，用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



阅读使用说明

关于保修

- 正常使用过程中如出现故障，自购买当日起1年内保修(耗材、配件除外)。
- 另外，超过保修期后，寄送产品的运输费用由用户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障，按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也可能产生费用，请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障，请联系当地经销商或中国总代理。

● 免费维修的相关规定

1. 保修期间，根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行使用时所出现的故障，可携带本产品前往购买本产品的经销商处接受维修。
2. 保修期间，产品发生故障并需要接受免费维修时，请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
3. 保修期间，住址搬迁时，请提前与购买本产品的经销商联系。
4. 保修期间，如将本产品送作他人使用而导致本产品无法接受本说明书中所记载经销商的维修时，请联系当地经销商或中国总代理。
5. 保修期间，以下情况不属于无偿保修的对象范围。

- (1) 使用不当或不当的维修及改造所造成的故障及损伤
- (2) 电池及消耗品、配件等零部件更换时
- (3) 因以下①~⑩而导致的故障及损伤：
 - ① 使用不当
 - ② 购买后，因运输、移动及跌落
 - ③ 不当的维修及改造
 - ④ 在高温、高湿的环境下使用
 - ⑤ 与本产品连接的其他电器设备的异常
 - ⑥ 非一般家用情况(例如：需长时间使用或使用异常电压等的商用情况)
 - ⑦ (若说明书有指定的情况下)用指定以外的方法通电
 - ⑧ 使用非原装部件
 - ⑨ 装载在车辆、船舶上
 - ⑩ 在海外使用
- (4) 火灾、地震、水灾、以及其他自然灾害，环境污染，以及战争和冲突造成的损坏
- (5) 顾客疏忽导致的损伤，如坠落、浸泡、盗窃、遗失等情况
- (6) 当出现改装或者拆卸的迹象时
- (7) 当确认产品使用了我司没有预期的使用方式，或不遵守我司提供的使用说明和安全说明时
- (8) 当保修证书或发票未附上时，或当购买日期和销售商名称未填写或盖章，或文字已被改写时
- (9) 当根据我们的销售记录等判断产品被转让，转售，或为二手商品(包括拍卖购买、私人销售或从非授权经销商购买等)时
- (10) 当从制造和销售开始过了相当长的时间，修理或更换零部件的安排变得困难时
- (11) 本保修卡中所规定的范围之外的情况

6. 保修地域仅限中国大陆地区。

※本保修卡对免费维修的时间及条件进行了一定约束，但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如对过了保修期的修理尚有不明确之处，可向购买本产品的经销商咨询。

※因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿保修对象范围外。

※保修地域仅限中国大陆地区。

No. _____

保修卡

凭卡修理

品 类	家用美容仪	型 号	YJMF1系列
名 称	LED光学美容仪		
保 修	对 象	时 间	
	控制器、本体(面罩)	自购买本产品 当日起1年内	
※ 经 销 商	门店名称/地址/联系 请贴上标有购买日期的 明细或者将其与本质保书 一起保管。		

请经销商将带有※的必填栏填写完毕相关的信息，然后交回客户保管。

本保修卡承诺根据记录的内容免费维修。

左列“免费保修期”内发生故障时，请您携带本产品及保修卡前往购买本产品的经销商进行维修。

- 如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期或没有购买明细，则此保修卡无效。
- 本保修卡不接受补办，请妥善保管。

中国总代理

广东倍捷医疗科技有限公司

广东省佛山市顺德区盈峰商务中心

客户服务中心: 400-931-8556

中国官网: <https://www.ya-manchina.com/>

制造商

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4



日本官网

Memo

Memo

